

MELLIFE


Total Facial Plus

保管用

保証書付

お問い合わせ先

MELLIFE カスタマーセンター

 **0120-535-551**

受付時間／平日 10:00～17:00(土日祝を除く)


support@mellife.jp

※交換をご依頼の場合、ご購入日をご記入いただいた本保証書をご用意の上お問い合わせください。

取扱説明書

◆もくじ

安全上のご注意	…… P1～7
ご使用前に	…… P8
部品の説明	…… P9～10
基本の操作	…… P11～15
充電について	…… P16
お手入れについて	…… P17
故障かなと思ったら	…… P18
無償交換規定	…… P18

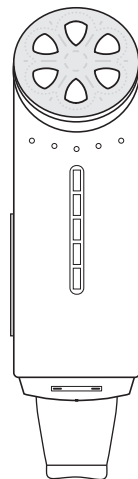

はじめに




この度はメリフ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
- ・必要なときにいつでもこの説明書を読むことができるように、この説明書は大切に保管してください。
- ・本製品は家庭用を目的としたものであり、商用目的での利用はお控えください。
- ・本製品を他の人に譲渡する際には、必ずこの取扱説明書もお渡しください。




安全上のご注意

- ・ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ・安全にご使用いただくために、ここに示す取扱説明書の内容や注意事項に従って正しく安全にご使用ください。
- ・残留物の蓄積を避けるために、使用後は本製品のクリーニングをお勧めします。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

-  **危険** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
-  **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
-  **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。
*物的損害とは、家屋、家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について

-  してはいけない内容です。
-  実行しなければいけない内容です。
-  注意しなければいけない内容です。

命にかかわるトラブル防止のために



危険



してはいけない内容

下記のような医療機器とは、絶対に併用しないでください。医療機器の誤作動を招き、事故や身体に著しい障害をもたらしおそれがあります。

- ・ペースメーカーなどの体内植込み型の医療機器
- ・人工心肺などの生命維持用医療機器
- ・心電計などの装着型の医療機器

身体や肌にかかわるトラブル防止のために



危険



してはいけない内容

●以下の方は、事故や肌・身体に支障をきたすおそれがありますので、ご使用にならないでください。

- ・金属アレルギー体質の方 ・皮膚などに知覚障害のある方
- ・皮膚感染症、皮膚炎などの方
- ・心臓疾患、障害およびその疑いのある方
- ・妊娠初期や不安定期、出産直後の方
- ・温度や刺激の感覚が自覚できない方
- ・幼児や成長期のお子様、および自分で意思表示のできない方

●以下のような部位には事故や肌・身体に支障をきたすおそれがありますので、ご使用にならないでください。

- ・顔以外の部位 ※まぶたや眼球、のど、唇、耳には使用しないでください。
- ・傷口や口などの粘膜部位 ・腫れもの、きび、化膿性疾患のある部位
- ・切り傷・手術（整形手術を含む）した部位 ・過度なやけどのある部位
- ・当日脱毛処理をした部位 ・ヘッドがあたらない部位
- ・金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位

●途中で気分が悪くなったり肌に異常があらわれた場合は、ただちに使用を中止し、治らない場合は医師に相談してください。

身体や肌にかかわるトラブル防止のために



警告



実行しなければならない内容

●以下の方は、事故や肌・身体に支障をきたすおそれがありますので、ご使用前に医師にご相談ください。

- ・アレルギー体質の方 ・皮膚が敏感な方
- ・医療機関で治療を受けている方 ・持病がある方
- ・手術中（整形手術を含む）、直後の方 ・移植手術をした方
- ・過去3ヶ月以内で使用部位で手術、レーザーによるシミやしわの除去、およびケミカルピーリングを受けた方
- ・エステやクリニックなどでダウンタイム（回復に要する時間）が必要な施術、および肌に強い赤みが発生する施術を受けた方
- ・薬を服用中の方 ・インプラントを使用している方
- ・網膜はく離のある方、あつた方
- ・今までに重い病気をした方

上記にあてはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

ご使用時の注意



注意



してはいけない内容

- ・本来の用途目的以外では使用しないでください。
- ・金属部分を他の金属にあてないでください。
- ・本製品を使用中に他の作業をしないでください。（運動中や運転中など）
- ・皮膚が薄い部位や、骨のすぐ上には長時間使用しないでください。
- ・必ずお肌の上で動かしながらご使用ください。
- ・オーパーケアは行わないでください。（使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守ってください）
- ・ベットには使用しないでください。
- ・化粧水やクリームが残っているなど、手が滑りやすい状態で使用しないでください。本体が滑り落ち、落下するおそれがあります。
- ・お子様や判断能力に欠ける方には使用させないでください。

お取り扱いについて



警告



してはいけない内容

- ・本製品を水の中に入れてたり、浴室では使用しないでください。感電や故障・破損の原因となります。
- ・本製品に同梱されている専用の充電ケーブルと製品仕様に適合した充電器以外は使用しないでください。デバイスのプラグは家庭用ソケットに接続してください。誤った操作により、故障や熱による火災を起こす可能性があります。
- ・本製品には充電式バッテリーが内蔵されています。火の中に入れてたり、高温・高熱の環境で使用・放置しないでください。
- ・製品に変形や破損、あるいは臭異などが発生する場合には絶対に使用しないでください。感電や火災を引き起こす可能性があります。
- ・乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させたりしないでください。誤飲による事故やけがの原因となります。
- ・落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。事故や破損、ケガの原因となります。
- ・他の電気製品・美容機器などと併用しないでください。体調不良を引き起こす原因となります。



注意



実行しなければならない内容

- ・使用されるご自身の肌へのみご使用ください。
- ・本製品を使用する際は、貴金属類（ネックレス・ピアスなど）や時計を外してください。ヘッドに金属があたると、感電やけだのおそれがあります。
- ・ご使用前に製品が清潔であるか、また安全であるか（本体に傷や変形がないか）を確認してからご使用ください。
- ・ご使用中またはご使用后に赤み、はれ、かゆみなどの異常が現れたときは使用を中止し、医師にご相談ください。心配な方は、初めてご使用になる前に目立たない部位でお試しいただき、異常が出ないことを確認してからご使用ください。
- ・可燃性および爆発性の物質（アルコール、ガソリン、スプレーなど）の近くで使用しないでください。
- ・化粧水や美容液などのスキンケア商品と併用する際は、その商品の注意書きを読み、正しくご使用ください。

お手入れと保管時の注意



警告



実行しなければならない内容

- ・本製品を直接水の中に入れてたり、水洗いしたりしないでください。
- ・お手入れの際には電源を切ってください。
- ・火気の近くで保管しないでください。
- ・シンナー、ベンジン、除光液、洗剤などは使用しないでください。
- ・ビニール袋等の梱包材料をお子様の手の届く場所に保管しないでください。
- ・本製品を湿気の多いところでの使用・保管はしないでください。
- ・15°C～30°C以下の環境下でご使用いただくことをおすすめします。
- ・周囲の温度が5°C～35°Cの環境下で保管してください。
- ・屋外や直射日光の下で使用しないでください。
- ・保管の際は、つまづいてけがをしないよう、安全な場所で保管してください。
- ・長期保管後、再び使用する際には、本品に異常がないことを確かめてからご使用ください。
- ・2か月以上使用しない場合は、2か月ごとに本製品を取り出し、充電をフルにしてから再度保管してください。
- ・本製品の動作に不具合が生じた場合は、保証書またはお買い上げ明細書をご用意の上カスタマーセンターへお問い合わせください。

海外でのご使用



警告



実行しなければならない内容

- ・必ず交流 AC 100 - 240V の範囲内でご使用ください。
(保証の対象は、日本国内でのご使用に限ります)
 - ・必ずプラグ形状・電圧を確認してからご使用ください。
- ※地域や宿泊先によってもプラグ形状や電圧が異なる場合があります。
必ずご確認の上ご使用ください。
- ※プラグ交換アダプターについては旅行会社や家電量販店などにご相談ください。

異常や故障が発生したときは



警告



実行しなければならない内容

- ・ご使用中、本製品が異常に発熱している場合、直ちに使用を中止し、電源をお切りください。やけどのおそれがあります。
 - ・本製品に異臭・異音・故障が見られた場合は、使用しないでください。けがや他の危険を及ぼすおそれがあります。
- ※超音波や EMS を使用中は独特の音がしますが、製品に異常はありません。

充電時のお取り扱いについて



危険



してはいけない内容

- ・充電ケーブルを引っ張って本体を移動させたり、持ち上げたりしないでください。
- ・濡れた手で充電ケーブルの抜き差しをしないでください。
- ・浴室や湿気の多いところで充電ケーブルを使用したり保管しないでください。
- ・水のかかりやすいところに充電ケーブルを置かないでください。
- ・充電ケーブルを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えないでください。
- ・充電端子にほこりが付着しないように定期的に掃除してください。



警告



実行しなければならない内容

- ・充電時以外は充電ケーブルを抜いてください。
- ・充電の際はプラグの形状と電圧(充電器の出力は5V-)を必ず確認してから充電してください。
本体が熱くなったり、発火や故障のおそれがあります。
- ・交流 AC 100 - 240V の範囲内でご使用ください。
(保証対象は国内での使用に限ります)
- ・充電ケーブルは確実に差し込んでください。
- ・充電端子に水が付着していないことを確認してから充電してください。
- ・地震や雷を感じたら使用を中止し、電源を切ってください。
充電中の場合も、コンセントを抜いてください。

防水について



注意



注意しなければならない内容

- ・本製品には防水機能がありません。
化粧水やお顔についた水分がつくのは問題ありませんが、水没は故障の原因となります。
直接水をかけたり、水の中に入れることはしないでください。
- ・湿度の高い環境下でのご使用・保管はしないでください。


廃棄について

- ・長期間の使用により、傷やヒビが入った場合は使用を中止し廃棄してください。
- ・本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。
自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- ・電池を取り外す場合は 電源を切ってから行ってください。



●電池の取り外し方法●

- ①プレート根本部分にある
パーツ結合部分から
前のカバーと後ろのカバーを
外します。
- ②バッテリーの線を抜いて、
バッテリーを取り外します。


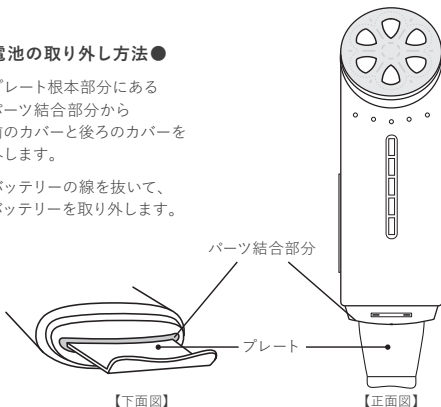


ご使用前に


■ご使用前の準備■

- ・貴金属（指輪やネックレス、ブレスレットなど）や時計を身につけている場合は、外してください。
- ・メイク落とし、洗顔後にご使用ください。
- ・化粧水などのスキンケア品を使用しない場合は、水をご準備ください。
- ・目の周りのケアを行う際は、必ずコンタクトレンズを外してください。
- ・各モードを選択するごとに「ピッ」と音がします。

※はじめて使用するスキンケア品を併用する場合は、その商品のパッチテストを行ってからご使用ください。

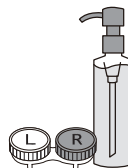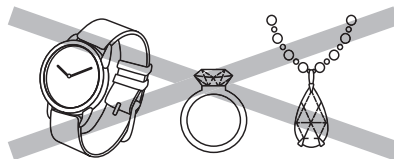


部品の説明

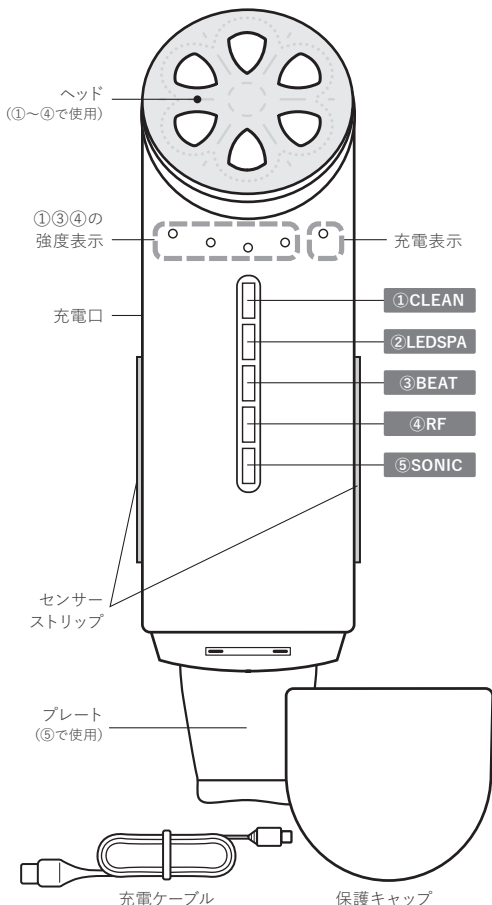

部品の説明

■ボタン機能・操作説明■

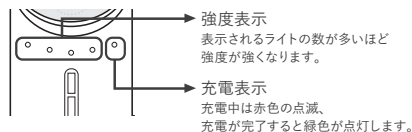

※各モードは個別にオン/オフ出来ます※

① CLEAN

▷イオンクレンジング

イオン電流により微細に毛穴の汚れを取り除きます。
※先に④RF ボタンを押してから①CLEAN ボタンを押すことでイオンが発動します。

② LEDSPA

▷LEDスキンケア

赤色LED一肌のカメを整えます。
③BEATモードや④RFモードとの併用が可能です。

③ BEAT

▷電気パルス

電気パルスによってうるおいを角質層すみずみまで届けます。
4段階の強度レベルを選択でき、ボタンを5回押すとモードがオフになります。
②LEDSPAとの併用が可能です。*角質層まで

④ RF

▷ラジオ波

温感高周波により肌をあたためながら整えます。
4段階の強度レベルを選択でき、ボタンを5回押すとモードがオフになります。
②LEDSPAとの併用が可能です。

⑤ SONIC

▷超音波スキンケア

落とすケア・与えるケアどちらにも使用できます。
ボタンを1回押す→デフォルトのピーリングモード
ボタンを2回押す→モイスターモード

■スマートタイマー機能■

電源を入れて10分間使用すると、自動的に電源がオフになります。
(オフになる前にピープ音が3回鳴ります。)

基本の操作

■お好きなモードをお選びください■

< クレンジング >

①CLEAN

イオンクレンジング

※先に④RF ボタンを
押してください。

⑤SONIC

超音波スキンケア

< 与えるケア >

②LEDSPA

LEDスキンケア

③BEAT


電気パルス

④RF

ラジオ波

⑤SONIC

超音波スキンケア

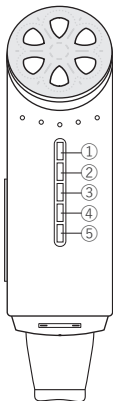


< クレンジングケア >

①CLEAN

イオンクレンジング

1. メイク落としや水をお肌に塗ります。
2. 「④RF」ボタンを押した後、「①CLEAN」ボタンを押して電源をオンにします。
3. センサーストリップを握りながら、ヘッドをゆっくりと内側から外側に、下から上に向かって滑らせます。
4. 顔全体にヘッドがいきわたったら、「④RF」ボタンをランプが消えるまで押し、次に「①CLEAN」ボタンを押して電源を切ります。
5. きれいな水またはぬるま湯でお顔をすすぎます。

※「RF」はボタンを押す回数で4段階の強度レベルを選択でき、ランプが点灯する個数が多いほど、強度が強くなります。RF ボタンを合計5回押すと強度ランプが消えます。再度レベル調整を行う場合は、始めからやり直してください。

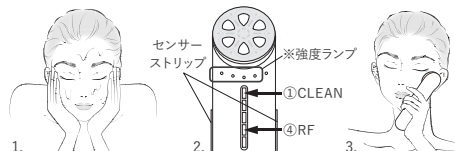

※故障の原因となりますので、手が濡れたまま本体を持たないください。

お手入れのポイント


- ・メリフの化粧水や美容液を併用をすると、より高い効果が期待できます。
※スキンケア商品と併用する際は、その商品の注意書きを読み、正しくご使用ください。
- ・のどや眼球、粘膜部位へのご使用はおやめください。
- ・ご使用中に何か所を集中的に使用したり、強く皮膚を圧迫したりしないでください。
- ・初めてご使用になる際は、一番弱いモードでのご使用をおすすめします。
- ・各機能を組み合わせてご使用いただけます。

⑤SONIC

超音波スキンケア -ピーリング-

超音波スキンケアモードは、ボタンを押す回数とプレートの向きで「落とすケア」も「与えるケア」も行えます。ここでは落とすケアの「ピーリングモード」をご紹介します。

1. メイク落としまたは水をお肌に塗ります。
2. 「⑤SONIC」ボタンを短く1回押します。
3. 下図のようにプレートに肌にあて、矢印の方向へゆっくりと滑らせるように動かします。
4. 「⑤SONIC」ボタンをもう一度短く2回押して、電源を切ります。
5. きれいな水またはぬるま湯でお顔をていねいにすすぎます。

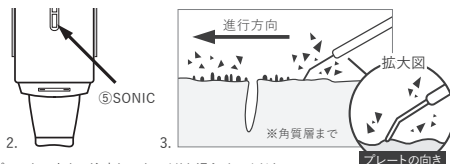

※プレートの向きに注意してゆっくりと滑らせてください。

※肌が十分に濡れていない場合や、途中で乾いてしまった場合は、メイク落としや水を足してください。


〈与えるケア〉

⑤SONIC 超音波スキんケア -スキんケア-

超音波スキんケアは、ボタンを押す回数とプレートの向きで「落とすケア」も「与えるケア」も行えます。

ここでは与えるケアの「スキんケアモード」をご紹介します。

1. 洗顔後のきれいな素肌に、メリフの化粧水や美容液を塗ります。
2. 「⑤SONIC」ボタンを短く2回押します。
3. 下図のようにプレートを肌にあて、矢印の方向へゆっくりと滑らせるように動かします。
4. 「⑤SONIC」ボタンをもう一度短く1回押して、電源を切ります。

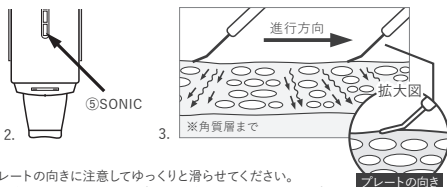

- ※プレートの向きに注意してゆっくりと滑らせてください。
 ※肌が十分に濡れていない場合や、途中で乾いてしまった場合は、メリフの化粧水や美容液を足してください。


②LEDSPA LEDスキんケア

★単独でのご使用も出来ますが、「③BEAT」「④RF」との併用が可能です。

■電源の入れ方■

「②LEDSPA」ボタンを押すことで電源のオンオフができます。

※光を直視しないでください。

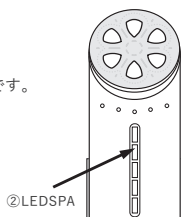


③BEAT 電気パルス ※週1~2回のご使用をおすすめします。


★LEDスキんケアモードとの併用が可能です。

1. 洗顔後のきれいな素肌に、メリフの化粧水や美容液を塗ります。
2. 「③BEAT」ボタンを短く押します。
3. 終了の際は、ランプが消えるまで「③BEAT」ボタンを押して電源を切ります。

※ボタンを押す回数で、4段階の強度レベルを選択でき、ランプが点灯する個数が多いほど、強度が強くなります。
 ボタンを5回押すと電源がオフになります。

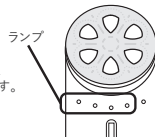

■おすすめの使用法■

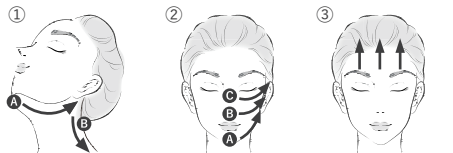

①一フェイスラインー

A→Bの順番でゆっくりと動かします。

④あごの下から耳の後ろまで
 ⑤耳の後ろから肩まで

②一頬ー

A→Cの順番でゆっくりと動かします。

⑥あごの先からこめかみまで
 ⑦鼻の側面からこめかみまで
 ⑧目の下の目頭からこめかみまで

③眉毛の上から

髪の生え際までゆっくりと動かします。

※注意※

- ・初めてご使用になる際は、一番弱いモードでのご使用をおすすめします。
- ・特に目のまわりなど皮膚が薄い部位や、骨のすぐ上には長時間使用しないでください。


〈与えるケア〉

④RF ラジオ波

★LEDスキンケアモードとの併用が可能です。


1. 洗顔後のきれいな素肌に、メリフの化粧水や美容液を塗ります。
2. 「④RF」ボタンを短く押します。
3. 終了の際は、ランプが消えるまで「④RF」ボタンを押して電源を切ります。

※ボタンを押す回数で、4段階の強度レベルを選択でき、ランプが点灯する個数が多いほど、強度が強くなります。ボタンを5回押すと電源がオフになります。

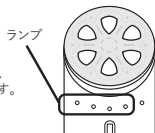

■おすすめの使用方法■

- ・各番号ごとに、A～Fの順にヘッドをお肌にあてます。
 - ・ヘッドで円を描くようにやさしく動かすと、効果的です。
- ※ヘッドを置く時間は5秒以内を目安にし、スライドさせながら次の部位に移動します。
- ①～⑤を2～3回繰り返してください。

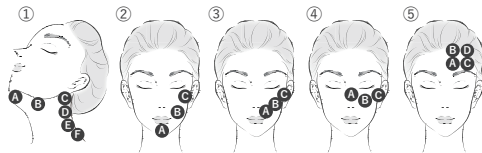

※注意※

- ・初めてご使用になる際は、一番弱いモードでのご使用をおすすめします。
- ・特に目のまわりなど皮膚が薄い部位や、骨のすぐ上には長時間使用しないでください。

充電について

■充電■

初めて使用する場合（長時間使用していない場合は）、必ず最初に充電してからお使いください。
また、十分に充電されていることを確認してからご使用ください。
電源が入らない / ビープ音が鳴る場合は充電が不足状態です。


■充電時間と使用回数■

充電時間	使用時間
約 2.5 時間	約 60 分

- ※充電環境は 25℃～35℃に保ってください。
- ※この表の使用時間は、フル充電直後の使用可能時間です。
- ※使用時間は使用方法・使用強度・使用環境により異なります。
- ※充電時間は電池の残量や使用環境により異なります。
- ※正しく充電をしても稼働時間が短い場合は、充電の寿命が考えられます。

■充電方法■

- ①充電ケーブルのソケットを本体の充電ポートに挿入し、ホストは充電器のUSBポートに挿入します。
- ②充電器のプラグを、お手持ちの家庭用電源ソケットに挿入します。
- ③充電が完了したら充電器を電源ソケットから抜き、充電ケーブルソケットをホストから抜きます。

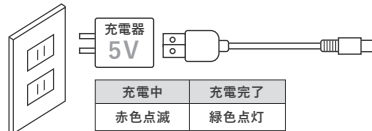

※本製品は、付属品の充電ケーブルまたは製品仕様と適合した充電ケーブルと充電器のみをご使用ください。

※ご注意ください※

プラグの形状と電圧（定格電圧：5V-1A）を必ず確認してから充電してください。
本体が熱くなったり、発火や故障のおそれがあります。

お手入れについて

※必ずお守りいただきたいこと※

- ・ご使用後は、必ず本製品のお手入れをしてください。
- ・お手入れは電源を切った状態で行ってください。
- ・本製品に直接水をかけないでください。故障につながる原因になります。
- ・ステンレスたわしや研磨剤入りクリーナー、アルコールなどを使用してふき取らないでください。部品に傷がついたり、変形、ひびが入るなどの故障が起こる可能性があります。

●基本のお手入れ●

- ① クリーニングクロスなどの柔らかい布で指紋や汚れをやさしくふき取ってください。
- ② 乾いた柔らかい布で、水滴をふき取ります。
※ 研磨布やエタノールを含むペーパータオルなどは使用しないでください。
- ③ 風通しの良い涼しい場所ですら自然乾燥させてください。
※ 直射日光が当たらないようにしてください。

●汚れがひどいときは●

- ・柔らかい布を35℃くらいのぬるま湯に浸し、拭いてください。
- ・それでも汚れが落ちない場合は、中性洗剤を水で薄め、柔らかい布を浸してしっかりと絞り、やさしくふき取ってください。

アフターメンテナンス

- ・本製品は家庭用を目的としたものであり、商用目的での利用はお控えください。
- ・本製品は1年間の保証がしております。保証期間はご購入日より1年間です。保証書には必ず「ご購入日」を記載し、大切に保管してください。
- 通常の使用における故障が発生した場合に、部品または製品全体を交換いたします。

※ただし、以下の場合には保証の対象外となります※

- ・保証期間を過ぎている
- ・不適切な使用による故障。(誤った操作、誤った充電の差し込み、人為的な損傷など)
- ・本来の目的以外での使用や不適切な操作、専門外のメンテナンス、本製品以外の付属品の使用などにより発生した故障。
- ・消耗品や無料のアクセサリ、およびその他の消耗品。
- ・不可抗力による故障 (雷や地震、火災、洪水など)
- ・正しい使い方でても経年劣化や摩耗が起りますが、性能への影響はほとんどありません。

製品仕様

製品名：トータルフェイシャルプラス
本体重量：約127g
高さ：200mm × 幅47mm × 厚さ32mm
入力電圧：AC100-240V 定格電圧：DC-5V、1A バッテリー容量：750mAh
充電様式：AC プラグ、または USB による充電、コードレスタイプ
充電時間：最長2時間30分
※満充電時の合計使用可能時間は約60分です。(10分間のスマートタイマー機能付き)
※使用頻度により充電時間・動作時間は短くなります。
同梱物：本体1個、充電ケーブル1個、取扱説明書1部

故障かなと思ったら

ご使用中に不具合が発生した場合は、以下を確認してください。
もし改善されない場合には、ご自身での解体や修理はせず
カスタマーセンターまでご連絡ください。

症状	原因	対策
充電ランプが 点灯しない	電池がスリープモードになっている	約20分充電をすることで点滅し始めます。次に使用する際は充電をフルにしてからご使用ください。
	ケーブルや充電器が壊れている	充電ケーブルや充電器を交換してからご使用ください。 ※定格電圧：5V-1A以外のものはお使いにならないでください。
・電源が入らない ・ピープ音が鳴る	バッテリー残量が少ない	本体を充電器に接続し、十分に充電してからご使用ください。
使用中にズリつき、 電流感・熱感を感じる	BEATモードやRFモードをご使用の場合、 モデルとしてこれらの反応が起こります。 強さを調整したり、化粧水や美容液を塗り足してみてください。	

無償交換規定

1. 取扱説明書に沿った適切な使用状態で発生した故障については、交換いたします。(保証期間内に限る)
2. 保証期間内に故障した場合の無償交換のご依頼は、本製品と本保証書をご用意の上、カスタマーセンターへご連絡ください。
3. 保証期間中でも、次の場合は無償交換できかねますので、ご理解の程よりしくお願い致します。
 - (a) 誤った使用やおお客様個人による修理・改造による故障および損傷。
 - (b) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (c) 天災や異常電圧などの不可抗力による故障および損傷。
 - (d) 電池等の消耗品の部品交換の場合。
 - (e) 一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。
(例：商用を目的とした長時間の使用)
 - (f) 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (g) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (h) 公式発売元以外で購入した場合。
4. 本保証書の対象は日本国内に限りです。This warranty is valid only in Japan.
※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無償交換をお約束するものではありません。
したがってこの保証書によって、お客様に法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の交換等についてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。
※使用による経年劣化・消耗の交換は有料となります。
5. 交換については、カスタマーセンターでの受付後、当社へ交換対象となる製品が到着してから発送いたします。詳しくは交換対応時にご説明いたします。